


# Testování antigenu covid-19 Výsledek do 15 minut

Získejte náskok před šířením nemoci  
díky antigennímu testování


[siemens-healthineers.com/clinittest-covid-antigen](https://siemens-healthineers.com/clinittest-covid-antigen)

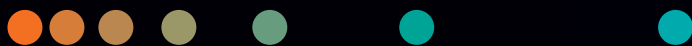

## Test CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen

Novinka  
– možné  
provádět  
také ze stěru  
z nosu

Identifikace pacientů infikovaných onemocněním covid-19 má zásadní význam pro zvládnutí a prevenci šíření tohoto onemocnění. CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test je imunochromatografický test s laterálním průtokem, který disponuje duálním systémem barev, je vizuálně vyhodnotitelný a snadno použitelný s výsledky za pouhých 15 minut. Není potřeba žádný specializovaný personál, žádné vybavení nebo analyzátor – test lze provést kdekoli a kdykoliv. Pomocí tohoto testu je možné, pokud bude součástí komplexní strategie, zabránit komunitnímu šíření.

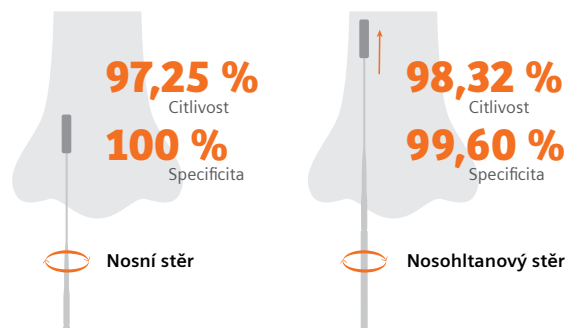

### Rychlost a spolehlivost

Přesné výsledky za pouhých 15 minut



### Dostupnost

Využitelný pro testování na místě tam, kde to potřebujete nejvíce



### Jednoduchost

Není třeba žádný laboratorní personál ani vybavení;  
dvě možnosti odběru vzorku

# Dodatečné informace o produktu

Klinické vlastnosti testu CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test byly hodnoceny na sedmi místech v USA, kde byli pacienti zaregistrováni a testováni. Testování proběhlo na několika různých pracovištích, klinických prostředích a u různých provozovatelů. Výsledné soubory dat pro odběr vzorků z nosohltanu i z přední části nosu splňují nejnovější požadavky většiny hlavních regulačních úřadů a prokazují vysoce kvalitní výkonnost.

## Vlastnosti metody u stěru z nosohltanu

Metoda	PCR (nosohltanový stěr)		Celkové výsledky	
	Výsledky	Pozitivní		Negativní
	Pozitivní	117	3	120
	Negativní	2	743	745
<b>Celkem</b>		<b>119</b>	<b>746</b>	<b>865</b>

Relativní citlivost: 98,32 % (95% CI\*: 94,06 až 99,80 %)

Relativní specifická: 99,60% (95% CI\*: 98,83 až 99,92 %)

Přesnost: 99,42% (95% CI\*: 98,66 až 99,81 %)

\*Interval spolehlivosti

## Vlastnosti metody u stěru z nosu

Metoda	PCR (nosohltanový stěr)		Celkové výsledky	
	Výsledky	Pozitivní		Negativní
	Pozitivní	106	0	106
	Negativní	3	128	131
<b>Celkem</b>		<b>109</b>	<b>128</b>	<b>237</b>

Relativní citlivost: 97,25 % (95% CI\*: 92,17 až 99,43 %)

Relativní specifická: 100 % (95% CI\*: 97,16 až 100 %)

Přesnost: 98,73 % (95% CI\*: 96,35 až 99,74 %)

\*Interval spolehlivosti

## Specifikace

**Doba testování do výsledku:** 15 minut

**Typ vzorku:** Stěr z nosohltanu nebo stěr z přední části nosu

**Uchovávání:** Pokojová teplota nebo chlazený (2–30 °C)

**Doba použitelnosti:** 24 měsíců od data výroby

**Detekovaný antigen:** Nukleokapsida

## 11555845 CLINITEST

### RAPID COVID-19 ANTIGEN TEST

Balení 20 testů

Cena za balení 2200,- Kč bez DPH

Cena za test 110,- Kč bez DPH

CLINITEST je obchodní známka společnosti Siemens Healthcare Diagnostics Inc. nebo jejích poboček. Ostatní ochranné známky a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Produkt podléhá kontrole FDA pro povolení pro nouzové použití (EUA) a není k dispozici k prodeji v USA. Dostupnost produktu se může v jednotlivých zemích lišit. Distribuováno společností Siemens Healthineers. O dostupnosti se informujte u svého místního zástupce společnosti. Dodatečné specifikace a údaje o výkonnosti naleznete v návodu k použití.

## Siemens Healthineers Headquarters

Siemens Healthcare GmbH

Henkestr. 127

91052 Erlangen, Německo

Tel.: +49 9131 84-0

siemens-healthineers.com

## Local Contact Information

Siemens Healthcare, s.r.o.

Healthcare Laboratory Diagnostics

Karásek 1767/1

621 33 Brno

Česká republika

siemens.cz/diagnostika